



Tiziano®



CARTA DE MOLDES



3 CAPAS
Dientes de resina acrílica

Tiziano®


Las diferentes alternativas dadas en los moldes anteriores y posteriores satisfacen todas las necesidades clínicas, la escala cromática obtenida con las 3 capas reproduce la vitalidad de los dientes naturales, asegurando un trabajo con altos niveles de estética y funcionalidad.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Los dientes Tiziano están fabricados de tres capas, lo que permite identificar tres zonas estéticas diferentes con translucidez natural y mamelones bien definidos.


Tiziano®

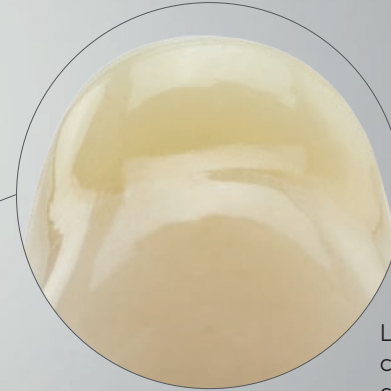

La estratificación de sus 3 capas permite que la zona cervical sea levemente más oscura que la corona del diente para dar una apariencia natural, este se intensifica de acuerdo a la forma, tamaño y volumen del diente.



Una translucidez del incisal adecuado que permite visualizar una integración sistemática de los mamelones.

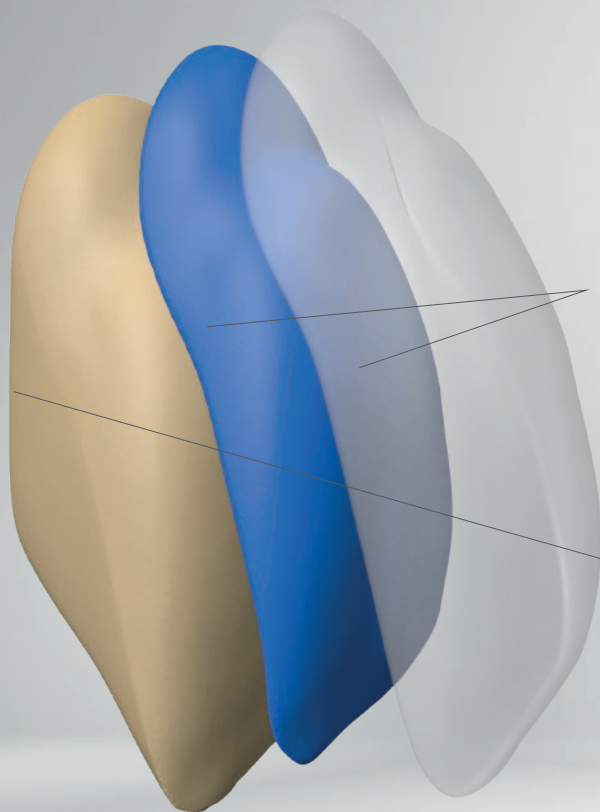

Material entrecruzado para el mejoramiento de las propiedades mecánicas.

Material en PMMA para no afectar la unión química a la base protésica.

La distribución correcta del material con que se fabrica el diente permite garantizar una adecuada unión química entre el diente y la base protésica.



**Sección de polímero*

Polímero entrecruzado.

Los dientes Tiziano son fabricados con alto contenido de Cross-Link para obtener un polímero altamente entrecruzado, en ausencia de otros materiales de relleno inorgánicos, lo que le confiere las siguientes propiedades:

- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a los solventes orgánicos.
- Estabilidad de color.
- Excelente unión a la base dentadura.

Lo que garantiza su estabilidad y durabilidad en el tiempo brindando al paciente el mejor desempeño y confort.





Ver video
de resistencia
a los solventes

PRUEBA DE COMPARACIÓN



Tiziano®

Competencia

0 horas

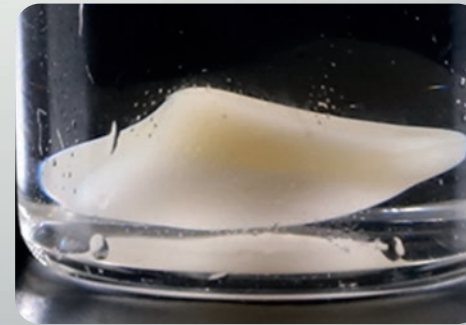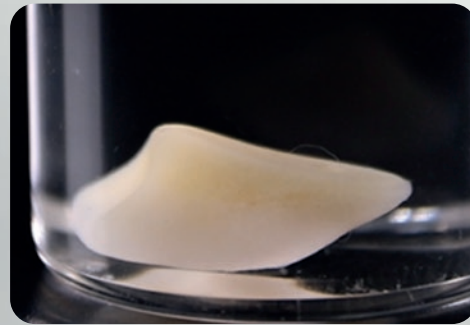

24 horas

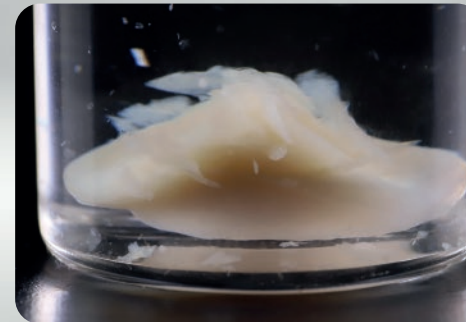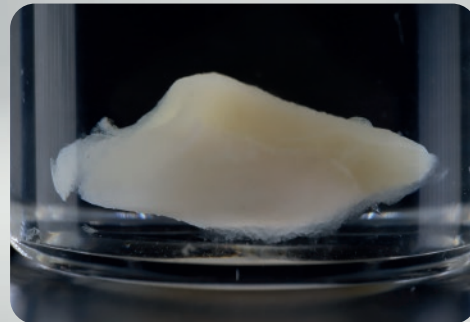

Los dientes Tiziano fueron sometidos a una prueba extrema de resistencia con otras marcas, ambas fueron sumergidas en monómero por un lapso de 24 horas, durante este tiempo se hace seguimiento al comportamiento del material. Gracias al alto contenido de Cross-Link Tiziano presenta una mayor resistencia a los solventes, lo que confiere propiedades adecuadas para su aplicación

portux®
by newstetic
Discos CAD CAM PMMA




Características

- Gran variedad de tonos monocapa y multicapa.
- Disponible en diámetros y espesores estándar de la industria.
- Traslucidez natural.
- Biocompatible con tejidos orales.
- Fácil de maniobrar y fresar.
- Color estable.
- 10 capas cromáticas.




CARTA DE MOLDES

Molde TE 12 Anteriores Superiores

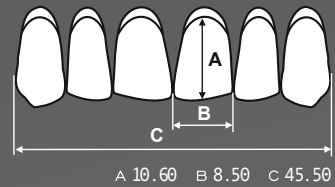


Molde TC 1 Anteriores Inferiores

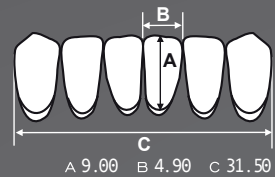


- A. Largo del central sin cuello (mm)
- B. Ancho del central (mm)
- C. Ancho de 6 anteriores en línea recta (mm)

Posteriores Superiores

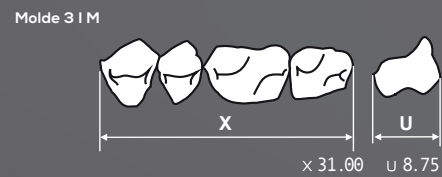

Posteriores Inferiores

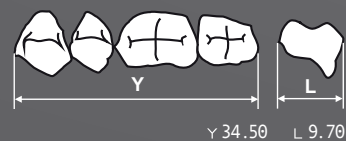


X/Y. Promedio del ancho de un juego I X 4

U/L. Promedio del ancho del primer molar

Tipo I (Anteriores) 3 capas y
Tipo II (posteriores) 3 capas

ANTERIORES SUPERIORES

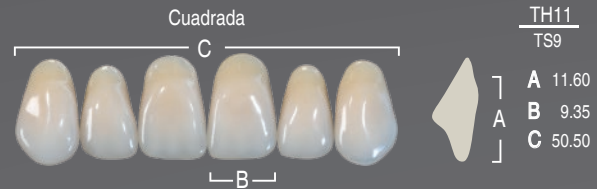

Cuadrada-Triangular



Cuadrada-Ovalada



Triangular




Cuadrada-Triangular-Ovalada



TE75
TN5
A 11.00
B 8.35
C 45.50

ANTERIORES INFERIORES

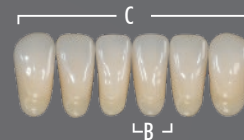

TC1
A 9.00
B 4.90
C 31.50

TE2
A 9.40
B 4.95
C 33.50

TF3
A 8.85
B 4.95
C 32.00

TH4
A 9.10
B 4.90
C 32.00



TN5
A 9.10
B 5.20
C 33.50



T06
A 9.80
B 5.40
C 35.50



TP7
A 8.75
B 5.40
C 35.50



TR8
A 9.25
B 5.20
C 36.00



TS9
A 9.65
B 5.70
C 38.50



TK1
A 11.85
B 5.90
C 38.50



TF43
TN5
A 9.60
B 8.80
C 45.50



TH45
TR8
A 11.25
B 8.85
C 49.50



TC52
TC1
A 9.00
B 7.40
C 40.00



TD55
TE2
A 10.25
B 8.25
C 43.50



TG62
TK1-TR8
A 11.90
B 9.20
C 48.50



TG65
T06
A 11.50
B 9.00
C 47.50

Acrílico TERMOPOLIMERIZABLE

VERACRIL®
Heat-curing Acrylic

KIT DE CARACTERIZACIÓN

8 colores de acrílicos que te permiten lograr en tus prótesis dentales el aspecto natural indicado.













CARTA DE MOLDES


Tres Capas Cromáticas

Tonalidades:

A0 · A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4
B0 · B1 · B2 · B3 · B4
C1 · C2 · C3 · C4
D2 · D3 · D4

Angulación de Posteriores

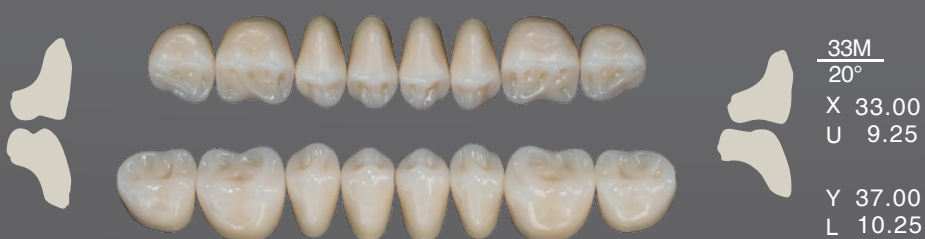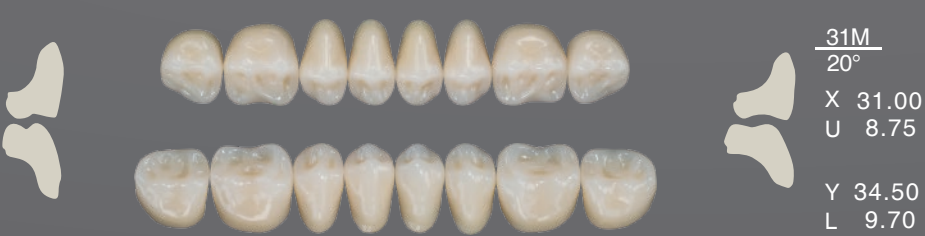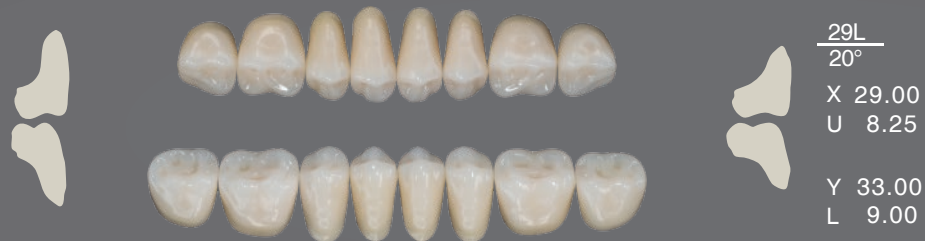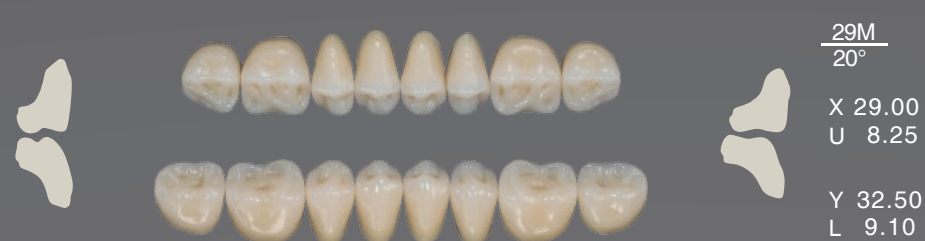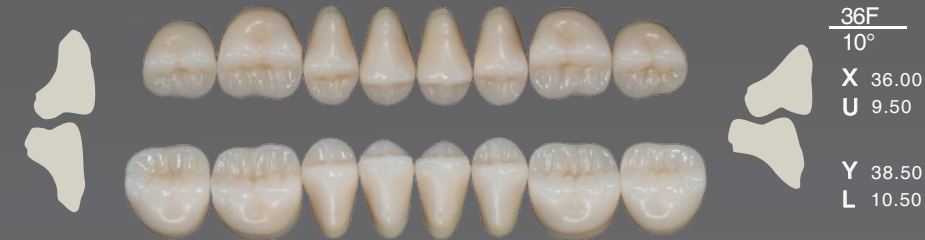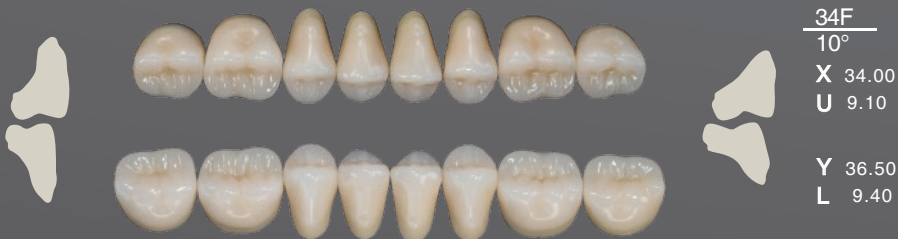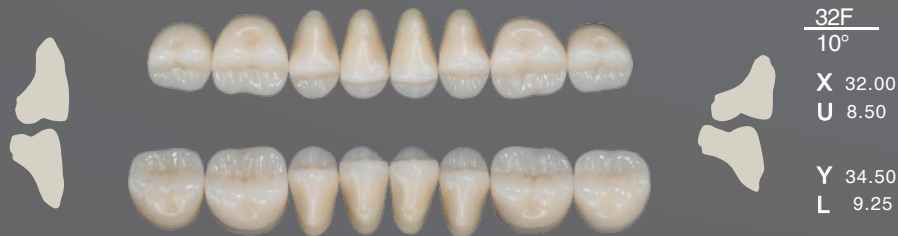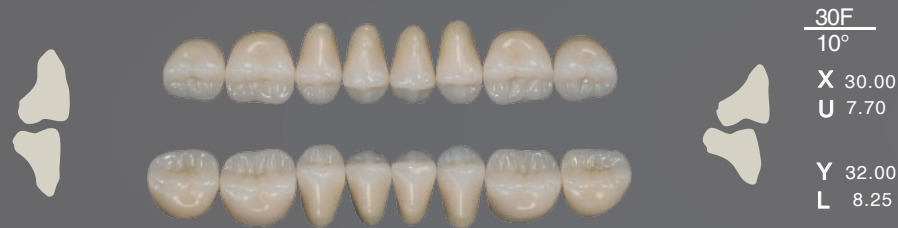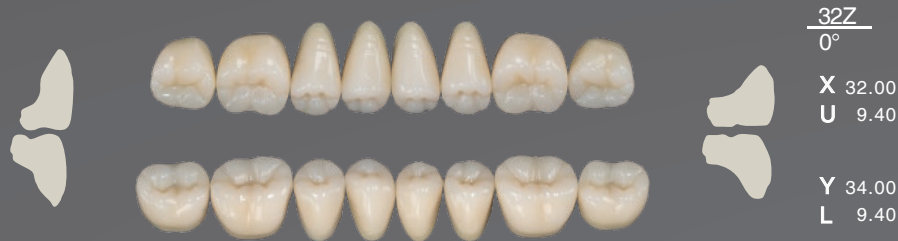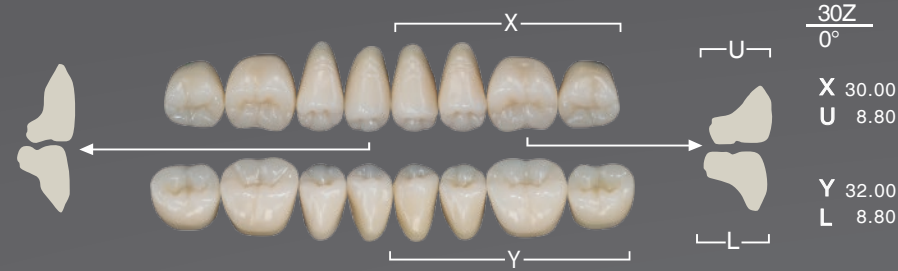

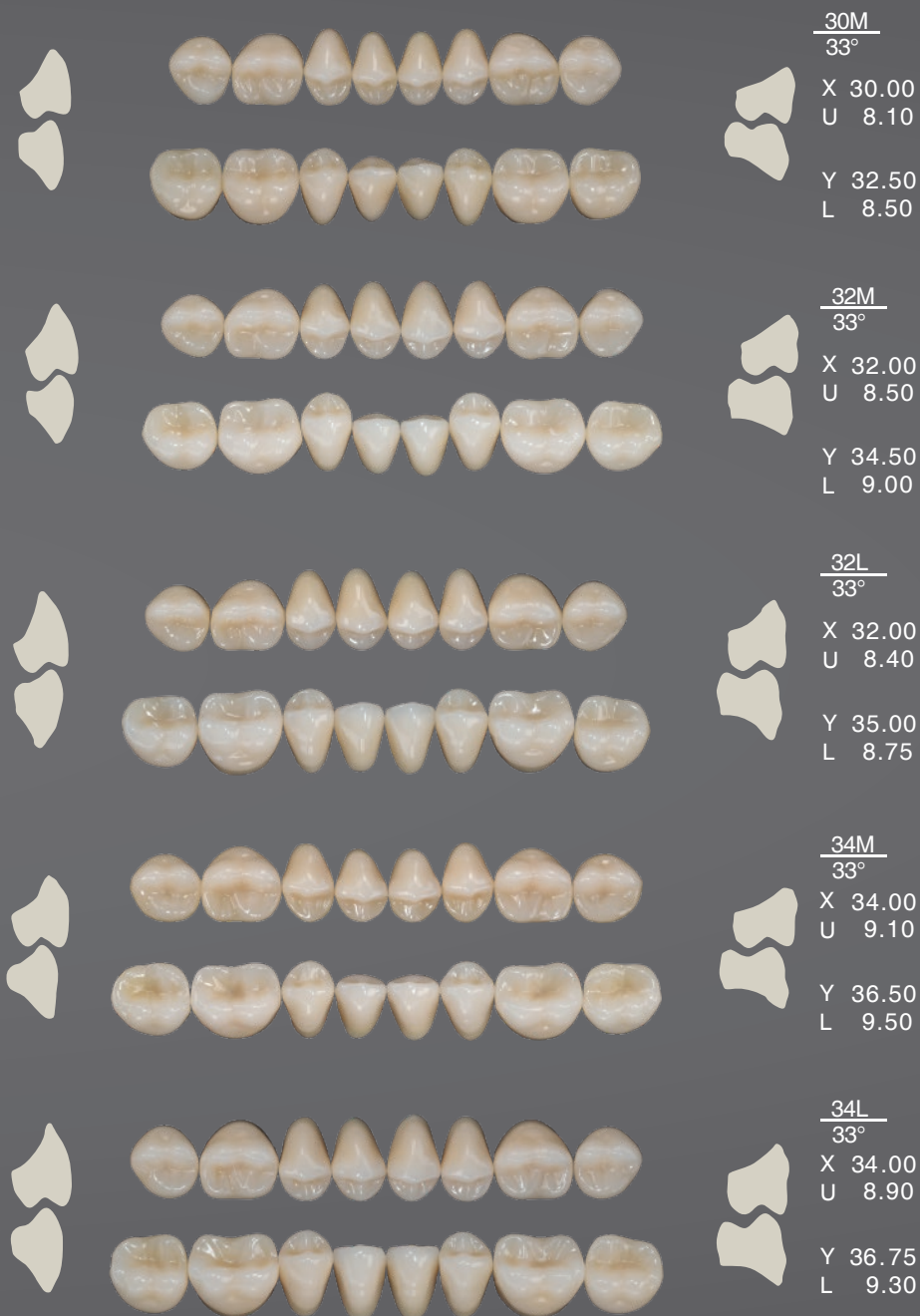

Anteriores		Posteriores			
SUP	INF	0°	10°	20°	33°

Cuadrada

TH11	TS9	32Z	34F	33M	34M
TE12	TN5	32Z	32F	31M	32L
TG12	TR8	32Z	34F	33M	34M
TE13	TH4	30Z	30F	31M	30M

Cuadrada-Triangular

TD21	TF3	30Z	30F	29L	30M
TJ21	TK1	32Z	36F	33M	34L
TX21	TP7	32Z	32F	31M	32M
TC22	TC1	30Z	30F	29M	30M
TE22	TH4	30Z	30F	29L	30M
TG22	T06-TP7	32Z	32F	31M	32M
TH22	TP7	32Z	34F	33M	34L
TF24	TF3-TH4	32Z	32F	31M	32L

Cuadrada-Ovalada

TF31	T06-TP7	32Z	32F	31M	32L
TE32	TH4	32Z	32F	31M	32M

Triangular

TD42	TF3	32Z	30F	29L-29M	30M
TF42	TH4	32Z	32F	31M	32L
TG42	T06-TP7	32Z	32F	31M-33M	32M
TD43	TC1	30Z	30F	29L-29M	32M
TF43	TN5	32Z	32F	31M	32M
TH45	TR8	32Z	34F	33M	34L

Triangular-Ovalada

TC52	TC1	30Z	30F	29M	30M
TD55	TE2	30Z	30F	29M	30M
TG62	TK1-TR8	32Z	34F	33M	34L

Ovalada




TG65	T06	32Z	34F	33M	34L
------	-----	-----	-----	-----	-----

Cuadrada-Triangular-Ovalada

TE75	TN5	30Z	30F	29L	30M
------	-----	-----	-----	-----	-----


CARTA DE MOLDES EURO

ANTERIORES

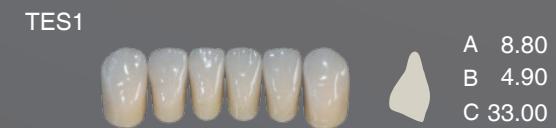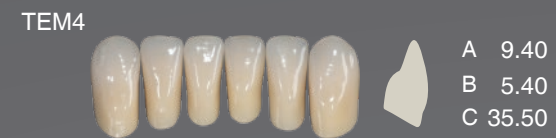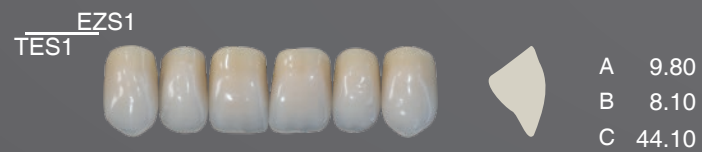


POSTERIORES

T1E

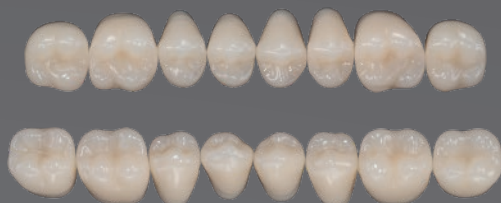


X 30.50
U 9.50
Y 32.70
L 8.70

T2E

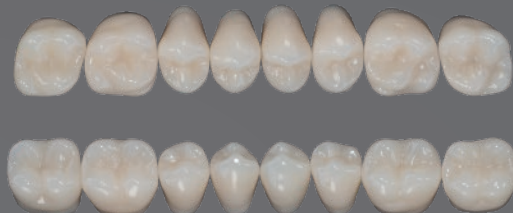


X 32.90
U 9.50
Y 33.70
L 9.00

T3E

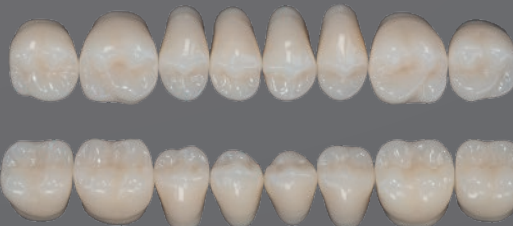

X 33.50
U 11.10
Y 34.60
L 9.80

T4E

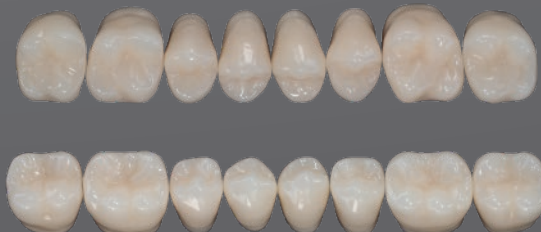

X 34.80
U 11.80
Y 36.10
L 9.80

Tres Capas Cromáticas

Anteriores

SUP	INF	Posteriores
ETM4	TEM4	T2E
EOL4	TEL6	T4E
EOM3	TEM3	T3E
EZS1	TES1	T1E
EZS2	TEM5	T2E

Tonalidades:

A0 · A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4

B0 · B1 · B2 · B3 · B4

C1 · C2 · C3 · C4

D2 · D3 · D4

FORMAS FACIALES

Los incisivos centrales son la clave de la estética, la forma de los dientes anteriores de Tiziano tiene relación con los contornos faciales del paciente. En Tiziano se describen diferentes tipos de rostros: Cuadrado, Triangular, Ovalada y combinaciones.

Cuadrada



TE13

Cuadrado triangular



TD21

Cuadrado ovalada



TF31

Triangular



TD42

triangular Ovalada



TC52

Ovalada



TG65

Cudrada
Triangular
Ovalada




TE75

ANGULACIÓN DE POSTERIORES

El tipo y la calidad de oclusión que se logra en cada paciente, está en razón directa con la forma y tamaño de las cúspides de los dientes posteriores, por esta razón, los dientes posteriores de Tiziano están definidos por inclinaciones cuspidéas, que es uno de los factores de las Leyes de la Articulación, para lograr una oclusión balanceada.

0°

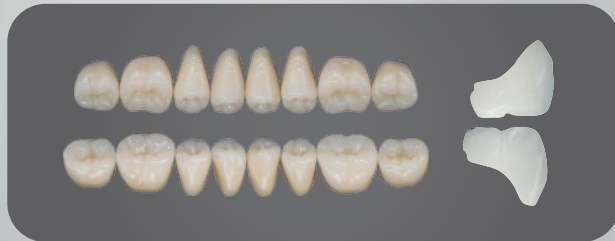

Ref: $\frac{30Z}{0^\circ}$

Posteriores Tiziano 0°

Se elimina la posibilidad de contactos prematuros, disminuyen la presión, y por lo tanto permiten una mejor estabilidad. La superficie oclusal está formada por diversos diseños variables de planos y surcos.

10° - 20°



Ref: $\frac{36F}{10^\circ}$

Posteriores Tiziano 10°, 20°

Poseen menos altura cuspidéa, producen menos interferencias en relaciones excéntricas, menor interferencia lateral que en los dientes de 33°.

33°



Ref: $\frac{34M}{33^\circ}$

Posteriores Tiziano 33°

Los dientes artificiales con esta inclinación, son comparables con los dientes naturales, al tener superficies cortantes, facilita el proceso de masticación. Se recomienda cuando los factores que intervienen en la oclusión balanceada, no están notoriamente alterados.



**Prótesis realizada por TPD Benjamín Sierra - Colombia.*

Tiziano®

A master piece

Una obra maestra

" Los dientes Tiziano presentan unas características de morfología moderna basadas en las últimas tendencias que hay en el mercado. Posee gran variedad de moldes con formas anatómicas y estéticas. La línea cuenta con unas tonalidades de color acorde a la guía de colores denotando mucha vida y calidad.

En dientes posteriores la oclusión brinda una buena relación diente a dos dientes acorde para una rehabilitación en oclusión bilateral balanceada permitiendo realizar movimientos ideales y tener unos buenos puntos de contacto para el caso clínico".

TPD Benjamín Sierra - Colombia.



Dirección: Cra 53 N° 50-09 Guarne - Antioquia - Colombia
Teléfono: (+ 57 - 60 -4) 550 0000
E-mail: infocolombia@newstetic.com
www.newstetic.com



SC 358-1
SC 358-2



DM 017-1
DM 017-2



ISO
2212



infocolombia@newstetic.com

Tiziano®

